

veterinary technology for life

# Eickemeyer®

[www.eickemeyer.ch](http://www.eickemeyer.ch)


Telefon 071 788 23 13

## *EickLoxx Small Contour Plattenset*



# EICKLOXX SMALL CONTOUR PLATTENSET – KOMPONENTEN UND EIGENSCHAFTEN

Das EickLoxx Small Contour Plattenset umfasst diverse anatomisch vorgeformte Osteosyntheseplatten für die Versorgung von Frakturen am distalen Radius und Femur, Ilium, Acetabulum und für Arthrodesen am Carpus und Tarsus. Es ergänzt die zuschneidbaren Platten des EickLoxx Small Osteosynthesystems und ist somit ebenfalls für die Versorgung von Katzen und Hunde bis 15 kg ausgelegt. Das Instrumentarium aus dem EickLoxx Small Osteosynthesystem findet analoge Anwendung.

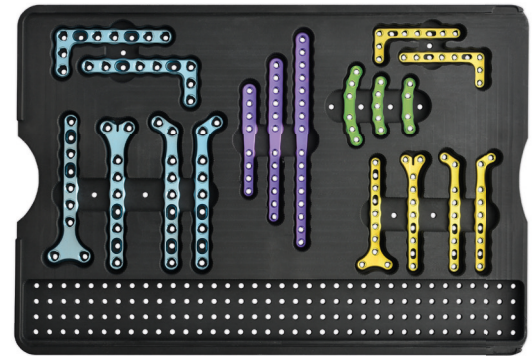

Die Titanplatten des EickLoxx Small Contour Plattensets sind in zwei Plattenstärken erhältlich: Die 2,2 mm Platten (gold, grün und magenta) können mit den 1,7 mm sowie 2,3 mm Schrauben und die 3,0 mm Platten (hellblau) wahlweise mit den Schrauben 2,7 mm, 3,5 mm sowie 4,0 mm der EickLoxx Reihe polyaxial verriegelt werden.


Trotz Konturierung können die Platten bei Bedarf mit den Schränkeisen und / oder der Plattenbiegezange mit Rollen gebogen und mit der Schneidezange gekürzt werden.

Die Siebschale mit den EickLoxx Small Contour Platten passt in den Container für das EickLoxx Small (Art. Nr. 185555) auf die beiden Siebschalen des EickLoxx Small Osteosynthesystems.

## EickLoxx Small Contour Platten aus Titan

- ▶ Titanlegierung für höchste Biokompatibilität
- ▶ Multidirektionale Verriegelung bi- und monokortikal
- ▶ Beseitigt Abrieb
- ▶ Geometrie optimierte Festigkeit
- ▶ Biegbar in zwei Ebenen

**197910 – 197915, 197920 – 197925, 197930 – 197935**

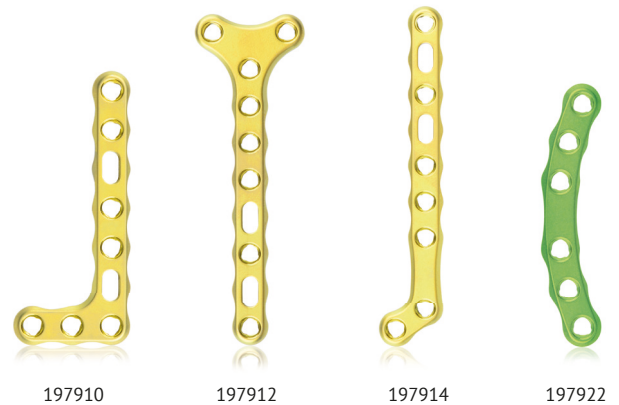


## Eigenschaften

- ▶ EickLoxx Knochenplatten minimieren den Kontakt mit dem Periost und reduzieren so die iatrogene Belastung der Knochenperfusion, wie sie bei herkömmlichen Kompressionsplatten üblich ist
- ▶ Erhaltung der Perfusion reduziert das Infektionsrisiko signifikant und beschleunigt die Knochenheilung
- ▶ Resistenz gegenüber Infektionen wird auch durch die Biokompatibilität von Titan und das Fehlen von Reibverschleiss erhöht

## Biologische Vorteile

- ▶ Reduziert Schäden an der Gefäßversorgung
- ▶ Erhöhte Resistenz gegen Infektion
- ▶ Beschleunigte Heilung

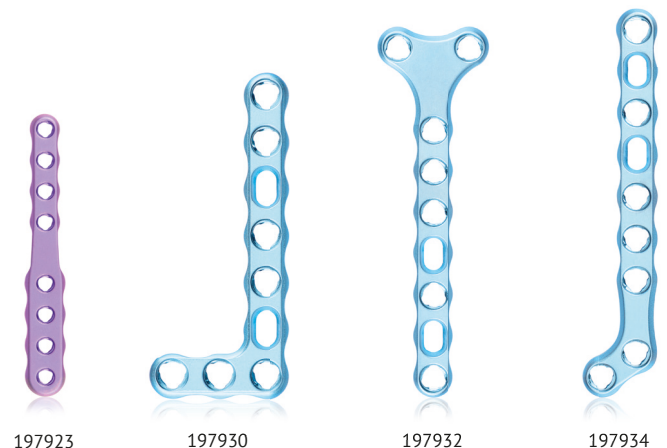

## EICKLOXX SMALL CONTOUR PLATTENSET – ARTIKELLISTE

| EickLoxx Small Contour Plattenset |                                                                                                                                                    |        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Art. Nr.                          | Bezeichnung                                                                                                                                        | Anzahl |
| 197900                            | Set komplett, bestehend aus:                                                                                                                       |        |
| 197950                            | EickLoxx Small Contour Platten-Siebschale, ohne Implantate                                                                                         | 1      |
| 197910                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, L-Platte links, 9-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Abmessungen (in mm): L 39 x B 18 x H 2,2           | 1      |
| 197911                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, L-Platte rechts, 9-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Abmessungen (in mm): L 39 x B 18 x H 2,2          | 1      |
| 197912                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, T-Platte, 10-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Abmessungen (in mm): L 54 x B 18 x H 2,2                | 1      |
| 197913                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Y-Platte, 10-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Abmessungen (in mm): L 56 x B 18 x H 2,2                | 1      |
| 197914                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Hockey-Platte links, 9-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Abmessungen (in mm): L 58 x B 11 x H 2,2      | 1      |
| 197915                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Hockey-Platte rechts, 9-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, gold, Abmessungen (in mm): L 58 x B 11 x H 2,2     | 1      |
| 197920                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, C-Platte, 4-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, grün, Abmessungen (in mm): L 28 x B 6 x H 2,2                  | 1      |
| 197921                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, C-Platte, 5-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, grün, Abmessungen (in mm): L 30 x B 6 x H 2,2                  | 1      |
| 197922                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, C-Platte, 6-Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, grün, Abmessungen (in mm): L 40 x B 6 x H 2,2                  | 1      |
| 197923                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Cricket-Platte, 4+4 Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, magenta, Abmessungen (in mm): L 55 x B 6–8 x H 2,2     | 1      |
| 197924                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Cricket-Platte, 6+6 Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, magenta, Abmessungen (in mm): L 80 x B 6–8 x H 2,2     | 1      |
| 197925                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Cricket-Platte, 8+8 Loch, System 1,7 / 2,3 mm, Titan, magenta, Abmessungen (in mm): L 105 x B 6–8 x H 2,2    | 1      |
| 197930                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, L-Platte links, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Abmessungen (in mm): L 56 x B 24 x H 3,0       | 1      |
| 197931                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, L-Platte rechts, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Abmessungen (in mm): L 56 x B 24 x H 3,0      | 1      |
| 197932                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, T-Platte, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Abmessungen (in mm): L 72 x B 22 x H 3,0             | 1      |
| 197933                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Y-Platte, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Abmessungen (in mm): L 72 x B 18 x H 3,0             | 1      |
| 197934                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Hockey-Platte links, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Abmessungen (in mm): L 75 x B 15 x H 3,0  | 1      |
| 197935                            | EickLoxx Small Contour Knochenplatte, Hockey-Platte rechts, 9-Loch, System 2,7 / 3,5 mm, Titan, hellblau, Abmessungen (in mm): L 75 x B 15 x H 3,0 | 1      |

